


Aptima® 멀티테스트 면봉 표본 채취 키트


환자 채취 절차 가이드

질 면봉 검체의 경우

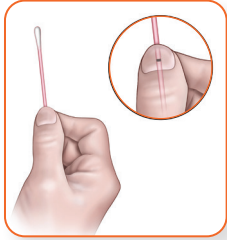

시작하기 전에 손을 씻으십시오. 이 절차에 대해 질문이 있는 경우, 담당 의료인에게 문의하십시오.


면봉 포장을 깨끗이 열고 면봉을 꺼냅니다. 부드러운 끄트머리를 만지거나 면봉을 내려놓지 마십시오. 부드러운 끄트머리를 만지거나, 내려놓거나, 떨어뜨린 경우, 폐기하고 새로운 Aptima 멀티테스트 면봉 표본 채취 키트를 받으십시오. **엄지와 검지를 면봉대의 중간 표시선에 오게 하여 면봉을 잡습니다.**

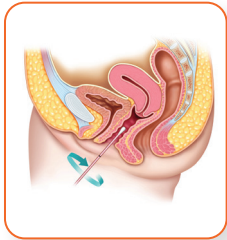

면봉을 질 입구에 약 2인치(5cm) 정도 조심스럽게 삽입하고 **면봉을 10~30초 동안 부드럽게 돌립니다.** 면봉이 질 벽에 닿아 면봉에 물기가 흡수되도록 하십시오. 피부를 만지지 않고 면봉을 뽑습니다.




면봉을 손으로 잡은 상태에서 튜브 캡을 돌려 엽니다. 튜브 내용물을 흘리지 마십시오. 튜브 내용물이 흘러나온 경우, 새 Aptima 멀티테스트 면봉 표본 채취 키트를 달라고 하십시오.

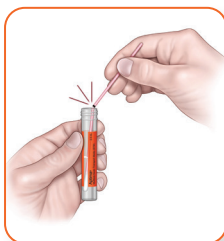

즉시 면봉을 운송 튜브에 넣되 표시선이 튜브 끝 위에 오도록 합니다. 표시선을 튜브의 상단 가장자리에 맞추고 면봉대를 조심스럽게 부러뜨립니다.



참고: 바이알 상단 가장자리 아래로 표시선을 삽입하지 마십시오. 면봉 끝을 바이알 바닥에 대고 밀지 마십시오.

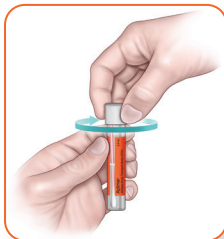

면봉대의 상단 부분을 폐기합니다. 캡을 튜브에 단단히 조입니다. 담당 의료인의 지시에 따라 튜브를 반송하십시오.

채취 가이드에 대한 번역본이 제공될 수 있습니다. 모든 채취 가이드는 Hologic 담당자에게 확인하십시오.

Hologic은 이 채취 절차 가이드를 일반적인 정보 제공 용도로만 제공하며, 이는 확정적인 지침이나 성능 보증이 아닙니다. 임상상의 적절한 제품 설명서를 읽고 이해하며 해당 지역, 주 및 연방 규칙과 규정을 준수해야 할 전적인 책임이 있습니다.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747

참조: Aptima 멀티테스트 면봉 표본 채취 키트 - 환자 채취, 미국 제품 설명서 AW-26254-001, Hologic, Inc.; 2022년.

DS-01553-1301 Rev. 007 © 2024 Hologic, Inc. 모든 권리 보유. Hologic, Aptima 및 관련 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 Hologic, Inc. 및/또는 그 자회사의 상표 및/또는 등록 상표입니다. 이 정보는 미국 및 기타 시장의 의료 전문가를 위한 것이며 이러한 활동이 금지된 제품 권유 또는 홍보를 위한 것이 아닙니다. Hologic 자료는 웹사이트, eBroadcast 및 무역 박람회를 통해 배포되기 때문에 그러한 자료가 표시되는 위치를 항상 통제할 수 있는 것은 아닙니다. 특정 국가에서 판매되는 제품에 대한 구체적인 정보는 Hologic 담당자에게 문의하거나 diagnostic.solutions@hologic.com으로 서신을 보내십시오.

