


Aptima® 多重检测拭子标本采集盒


患者采集样本指南

对于阴道拭子样本

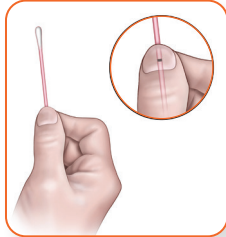


开始采集前请洗手。如果您对此程序有任何疑问，请咨询您的医护服务提供者。

打开拭子包装的一部分，取出拭子。不要触摸拭子软的一头，或将棉拭子放下。如果触摸了拭子软的一头、放下了拭子、或拭子跌落，则丢弃并取出一个新的 Aptima 多重检测拭子标本采集盒。**握住拭子，把拇指和食指放在拭子柄中间划线上。**

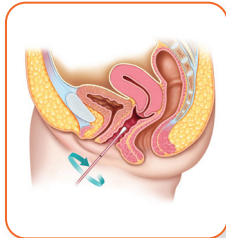

小心地将棉拭子插入阴道口约 2 英寸 (5 厘米)，轻轻**旋转拭子 10 至 30 秒**。确保拭子接触到阴道壁，以使拭子吸收水分。取出拭子，不要碰到皮肤。

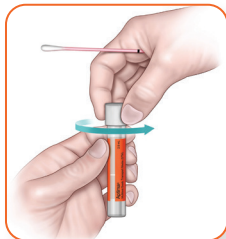

一手握住拭子的同时，拧开管帽。不要把管子的内含物洒出来。如果管子的内含物洒出，请索取一个新的 Aptima 多重检测拭子标本采集盒。



立即将拭子放到运送管中，使划线位于管子的顶部。将划线与管子的顶部边缘对齐，并小心地将拭子柄折断。



注：请勿将划线插入小瓶顶部边缘以下。请勿将拭子推到瓶底。



将拭子柄的上半部丢弃。将盖子紧紧拧到管子上。按照您的医护服务提供者的指示交回管子。

可能提供采集指南翻译。请咨询您的 Hologic 代表，以获取所有采集指南。

Hologic 提供本采集指南，仅是用其来告知信息；本指南不强求要一定按其操作或按其操作一定能保证采集性能。阅读和理解相应的包装说明书，并遵守适用的当地、州和联邦规章制度，这完全是临床医生的责任。

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747

参考资料：Aptima 多重检测拭子标本采集盒 - 患者采集。美国药品说明书 AW-26254-001。Hologic, Inc.; 2022 年。

DS-01553-401 Rev. 007 © 2024 Hologic, Inc. 保留所有权利。Hologic, Aptima 以及相关徽标是 Hologic, Inc. 和/或其子公司在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。这些信息旨在提供给美国与其它市场的医务人员，无意于在禁止产品招揽或促销活动区域作为此类活动的资料。Hologic 的资料是通过网站、网播和贸易展览分发的，因此有时无法控制此类资料会出现在哪些区域。若想了解有哪些产品在某个特定国家市售的具体信息，请联系您的 Hologic 代表，或发送电子邮件至：diagnostic.solutions@hologic.com。

